




Western Blot 实验

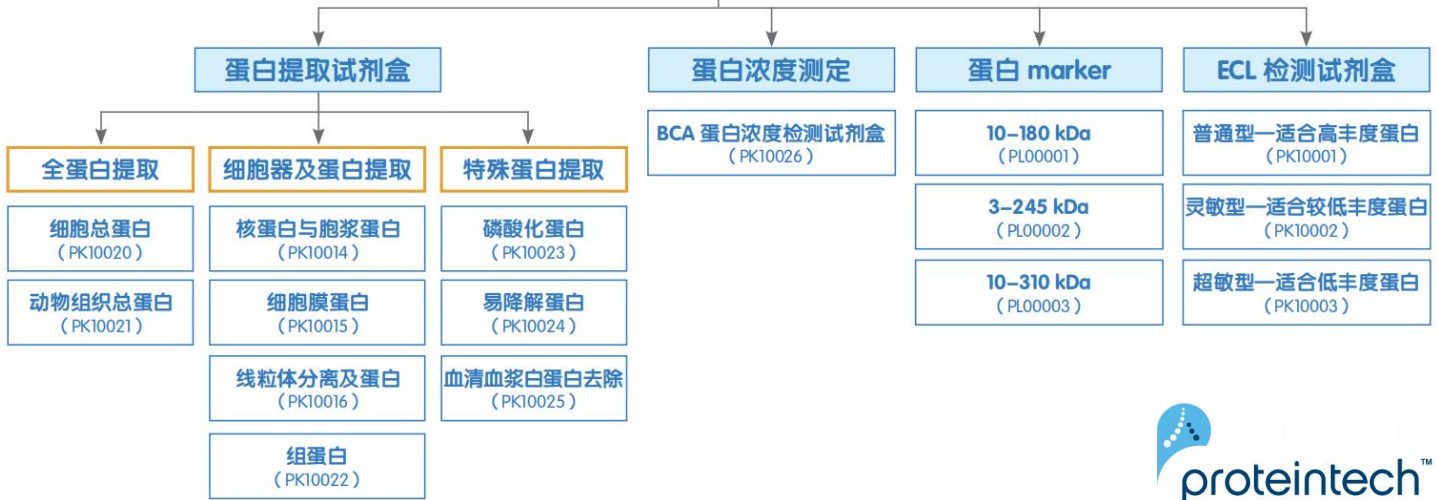

云南签约总代理

第一步——样品抽提与制备 / 蛋白酶抑制剂 / 蛋白定量

应用	货号	产品名称	描述	规格	目录价	促销价
全蛋白提取	PK10020	细胞总蛋白提取试剂盒	广谱：适用于各种细胞样品，提取蛋白种类多，不易降解，应用广：适用 WB、IP、ELISA 等	30T	300	咨询
	PK10021	动物组织总蛋白提取试剂盒	广谱：适用新鲜/冻存/无脊椎/脊椎动物组织，提取蛋白齐全，不易降解；应用广：提供不同裂解液（变性和非变性），满足不同实验需求			
细胞器及蛋白提取	PK10014	核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	独有的两步洗涤法可有效分离并提高纯度	30T	520	
	PK10015	细胞膜蛋白提取试剂盒	37°C 45min 跨膜蛋白处理方法（专利）提取范围广，得率更高！不易形成聚集体	30T	500	
	PK10016	线粒体分离及蛋白提取试剂盒	提取纯度高，有活性可用于流式实验，具有完整的线粒体功能	30T	550	
	PK10022	组蛋白抽提试剂盒	组蛋白种类齐全：除了 H2A、H2B、H3 和 H4 外还可以得到 H1；翻译后修饰完整性，提取纯度高于同类产品	50T	520	
特殊蛋白提取	PK10023	磷酸化蛋白提取试剂盒	适用各类磷酸化样品，提取效率高且有效防止样品在洗涤和裂解期间的去磷酸化。	30T	600	优惠
	PK10024	易降解蛋白提取试剂盒	适用消化、生殖系统及腺体、斑马鱼、细胞等	30T	550	
	PK10025	血浆血清白蛋白去除试剂盒	10 分钟即可完成，不限种属，去除率≥90%	60T	500	
裂解液	PR20035	RIPA 裂解液(强) 热销Hot	通用型广谱配方，即用型，快速裂解，经 Proteintech 百万次使用验证！需自备蛋白酶抑制剂	50ml	430	咨询
	PR20001	RIPA 裂解液(中)				
	PR20036	RIPA 裂解液(弱)				
	PR20002	SDS 裂解液				
蛋白酶	PR20032	普通型蛋白酶抑制剂混合液 (100X) 热销Hot	是一款以 PMSF 为主要成分的蛋白酶抑制剂混合物。使用前现用现加，-20°C 不结冰简化操作	1ml	480	
	PR20016	增强型蛋白酶抑制剂混合液 (EDTA-Free 100X in DMSO)	是多种蛋白酶抑制剂混合物组成的一款高效、广谱的抑制剂混合物。针对易降解蛋白。-20°C 不结冰。	1ml	450	
磷酸酶	PR20015	磷酸酶抑制剂混合液(100X) 热销Hot	是多种磷酸酶抑制剂混合物组成的一款高效、广谱的抑制剂混合物。（磷酸化抗体检测务必同时添加蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂！）-20°C 保存一年以上	1ml	480	优惠
浓度测定	PK10026	BCA 蛋白浓度检测试剂盒 热销Hot	是一种双组分、高精度、兼容去垢剂的蛋白定量试剂盒，灵敏度更高，蛋白质浓度的检测范围为 20 至 2000 µg/mL，最小检测蛋白量达到 0.2 µg，待测样品体积为 10-25 µl	250T	220	优惠
				500T	350	



样品浓缩、脱盐、更换缓冲液 在组织、细胞的破碎机抽提过程中，蛋白样品往往被稀释，而且带有高盐成分，使其不能直接用于 WB 分析，所以您需要超滤来处理蛋白样品。

如何选择 AMICON® ULTRA 离心超滤管？

1、确定样品的起始体积；2、确定您期望的大分子的分子量（MW），并选择截留分子量（MWCO）比 MW 小 2-3 倍的超滤膜。3、选择包装尺寸，数量越多价格越优惠哦！

Amicon® Ultra 离心超滤管采用立式超滤膜设计，能减小浓差极化和薄膜积垢，具有更大的处理膜面积，可在短短 10-15 分钟内进行快速样本处理，拥有较高的样本回收率！且能达到 25 至 80 倍较高的浓缩系数。

货号	产品名称	规格	处理量	优惠价
UFC5003 倒转离心回收样品	离心超滤管 Amicon Ultra-0.5 适合 1.5ml 离心机转子	单个购买	≤0.5ml	咨询 更多 优惠
	Amicon Ultra-0.5 按整包装购买特价 30K 以上价格不同；分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	
96 个/盒		15ul		
UFC8003 吸头回收样品	离心超滤管 Amicon Ultra-4 适合 15ml 离心机转子	单个购买	2-4ml	
	Amicon Ultra-4 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	
96 个/盒		50ul		
UFC9005 吸头回收样品	离心超滤管 Amicon Ultra-15 适合 50ml 离心机转子	单个购买	4-15ml	
	Amicon Ultra-15 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	
96 个/盒		200ul		

选择小软件，敬请咨询



超滤管应用领域
 病毒和噬菌体的浓缩
 核酸纯化、浓缩及脱盐
 未结合标记物的去除
 抗体的快速浓缩
 样品中去垢剂的去除
 酶的浓缩、脱盐
 双向电泳样品的制备
 尿液的浓缩

第二步——电泳和转膜、封闭、SDS-PAGE 电泳

货号	产品名称	描述	规格	目录价	促销	品牌
P0465S	BeyoGel™ Plus PAGE 预制胶	浓度 8%,10%,12%,4-15%,4-20%,8-20% 可选手工制胶过程中难免接触有毒挥发性物质且制胶耗时间较长，花 2 小时制胶？漏胶？有残留？快速让您开始蛋白电泳的利器----蛋白预制胶	Tris-Glycine	10 片/盒 50 片/盒	咨询	上样与电泳 碧云天 Beyotime
P0508S	10 孔、15 孔可选 胶尺寸：81×74×1.5mm		Hepes	10 片/盒 50 片/盒		
P1200	SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒	提供了配制 SDS-PAGE 凝胶所需的各种试剂，只需自备制胶器具和蒸馏水，即可制备高质量各种浓度的变性 PAGE 凝胶约 25/50 块。	25T 50T	240 380	更多	Solarbio® LIFE SCIENCES
PR20003	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (4X)	主要成份为 SDS, (DTT), 溴酚蓝, 缓冲盐溶液等, 不含剧毒的巯基乙醇	2ml 15ml	40 200	优惠	上样与电泳 PROTEINTECH
PR20004	SDS-PAGE 电泳液 1X	SDS-PAGE 电泳液适用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。使用时每个包装加蒸馏水溶解，定容到 1 升即可使用。本品可以回收重复使用 2-3 次。	干粉可配 1L	40		
PR20005	SDS-PAGE 电泳液 10X		干粉可配 1L	260		
PR20006	考马斯亮蓝染色液	以考马斯亮蓝 R250 为染料，适用于 SDS-PAGE 等蛋白电泳染色或 WB 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测	250ml	430	咨询 更多 优惠	ThermoFisher SCIENTIFIC
PR20007	考马斯亮蓝脱色液	适用于蛋白电泳染色后的脱色实验	250ml	430		
PL00001	常规分子量预染彩虹蛋白 marker 热销 Hot	分子量范围为 10kD-180kD 红蓝绿三色 泳道为：10, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 100, 140, 180 kDa	2x250 µl 10X250ul	760 3800		
PL00002	宽分子量预染彩虹蛋白 marker 3-245kDa	3, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 75, 100, 140, 180, 245 kDa	2x250 µl	860		
PL00003	超宽分子量预染彩虹蛋白 marker 10-310kDa	10, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 100, 140, 180, 245, ~310 kDa	2x250 µl	920		
26616	PageRuler™ 预染彩色蛋白 marker	10-180kDa 可用于 50-100 个凝胶泳道，5-10µl/ 泳道	2x250 µl	869	优惠	ThermoFisher SCIENTIFIC
26617	蛋白 marker	10 (10, 15, 25, 35, 40, 55, 70, 100, 130, 180 kDa)	10X250ul	3477		

Proteintech 21 年抗体研发验证经验推荐！

电泳和转膜、封闭等其他辅助试剂、耗材、配件

货号	产品名称	描述	规格	目录价	促销	品牌	
PR20008	Western Blot 半干法转膜液	一种安全无毒的转膜液，不含甲醇及其它有毒试剂	干粉配 1L	60	咨询 更多 优惠	 转膜与 封闭	
PR20009	WB 半干法转膜液 10X		10X 配 1L	300			
PR20010	Western Blot 湿法转膜液	湿法电泳转膜的缓冲试剂	干粉配 1L	60			
PR20011	Western Blot 封闭液	主要成分为脱脂奶粉，适用于 WB 过程中对已转移蛋白样品的膜进行封闭，可以降低背景，增强信噪比。	100ml	130			
PR20034	Western Blot 快速封闭液	相比于传统封闭液不含有蛋白质和非离子洗涤剂，避免了免疫活性污染物和洗涤剂残留对目的信号的干扰。封闭时间仅需室温 10 分钟即可获得更高的信号和更低的背景。	100ml 500ml	150 480			
PR20012	Western Blot 洗涤液(10X) TBST	适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比	100ml	130			
PR20013	Western Blot 抗体稀释液	适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗的稀释。	100ml	130			
IPVH00010	immobilon-P 疏水性 PVDF 转印卷膜 0.45um	PVDF 膜原理为疏水作用，蛋白吸附更强，提高了检测的灵敏度。膜染色性能好抗溶剂能力强，可做多轮杂交	26.5×375	4770			 转印膜
IPVH00010C			15X13.25	95			
ISEQ00010	immobilon-PSQ PVDF 转印卷膜 0.22um	0.45 适用于免疫印迹、斑点印迹及蛋白>20kDa 0.22 适用于分子量<20Kda 蛋白的 Western	26.5×375	5008			 碧云天 Beyotime
ISEQ00010C			15X13.25	400			
FFP51	转印滤纸(7.5×10cm) 滤纸厚度约为 0.4mm	由于本转印滤纸的尺寸略大于胶和印迹膜，适用于湿转。如果用于半干转或干转，为了避免短路，请自行裁剪成与胶和印迹膜一样大小。	100 片/盒	盒	 BIO-RAD		
1703965	半干转用加厚滤纸	规格 7.5X10cm 滤纸厚度 2.45mm	60 片/盒	盒			
1703932	湿转用厚滤纸	规格 7.5X10cm 滤纸厚度 0.84mm	50 片/盒	盒			
1703933	黑色纤维衬垫	规格 8 x 11 cm	4 片/包	包			
1653359	Mini-PROTEAN Comb 梳子	1.0mm 10 孔梳子 44ul 上样量	5 把/包	包	 BIO-RAD 配件 咨询 更多 优惠		
1653360		1.0mm 15 孔梳子 26ul 上样量					
1653365		1.5mm 10 孔梳子 66ul 上样量					
1653310	Mini-ProteanPlates 带间隔条的厚玻璃板	边条外板 0.75mm 边条	5 片/包	包			
1653311		边条外板 1.0mm 边条					
1653312		边条外板 1.5mm 边条					
1653308	Short Plates 短玻璃板	规格 7X10cm	5 片/包	包			
HTZY-3306	黑色纤维衬垫	可以和 bio-rad 完美匹配	4 片/包	包			
HTCZ-1157	加样梳	厚度：0.75mm / 1.0mm / 1.5mm 齿数：10 齿 / 15 齿	5 把/包	包			
HTCZ-1159	适用于 HT-MINI04，可以和 bio-rad 匹配						
HTCZ-1161							
HTCZ-1107	玻璃厚板 可以和 bio-rad 完美匹配	边条外板 0.75mm 边条	5 片/包	包			
HTCZ-1101		边条外板 1.0mm 边条					
HTCZ-1105		边条外板 1.5mm 边条					
HTCZ-1118	玻璃薄板	规格 7X10cm 可以和 bio-rad 完美匹配	5 片/包	包			
HTZY-3305	转印夹	适用于 HT-MINI04 可以和 bio-rad 完美匹配	1 个	个			



第三步——抗体孵育和检测



专业抗体生产商 被引用 SCI 文献已超过 16 万次……
400 余次荣登顶级期刊封面文章
1000 余次被《Cell》《Nature》《Science》文献引用

一抗、二抗、内参、标签抗体首荐品牌

货号	产品名称		应用	报价	优惠价
各种一抗	敬请咨询 或登录 http://www.ptglab.com/ 荣获 CiteAb“2016 年度最佳抗体验证开拓奖”“2019 年度免疫学明日之星奖”“2022 年度研究者之选奖”		覆盖人类基因组 2/3 靶标的抗体 覆盖肿瘤、干细胞、凋亡、自噬、 信号转导、免疫学、神经生物学	1350-元/50ul 2200-元/100ul 3000-元/150ul	咨询 优惠
SA00001-1	HRP- Goat Anti-Mouse IgG (H+L)二抗		ELISA, WB, IHC/ICC 更多种属二 抗、更多酶标二抗 (HRP、AP、 Biotin)、更多荧光素标记二抗 (红色、绿色、蓝色)敬请咨询...	180-元/100ul 680-元/500ul 现货供应	咨询 优惠
SA00001-2	HRP- Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)二抗				
SA00001-4	HRP- Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) 二抗				
SA00001-15	HRP-Goat Anti-Rat IgG (H+L) 二抗				
66009-1-Ig 20536-1-AP	鼠单抗 兔多抗	Beta-actin 内参抗体 分子量 42kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:500-1:5000	不带标记 980-元/100ul	咨询 优惠
60004-1-Ig 10494-1-AP	鼠单抗 兔多抗	GAPDH 内参抗体 分子量 36kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:2000-1:20000	4000-元/500ul 6000-元/1ml	
66031-1-Ig 11224-1-AP	鼠单抗 兔多抗	Alpha-tubulin 内参抗体 分子量 50-55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:10000 WB 稀释比 1:500-1:10000	带 HRP 标记	
66240-1-Ig 10094-1-AP	鼠单抗 兔多抗	Beta-Tubulin 内参抗体 分子量 50-55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:20000 WB 稀释比 1:500-1:5000	1200-元/100ul 4800-元/100ul	

以上内参和标签抗体均可提供 HRP 直接标记的, 另可提供多个品牌抗体敬请咨询! 可告知抗体的条件帮查询适合的产品!



普通

ECL 化学发光检测试剂盒

灵敏

ECL 化学发光检测试剂盒

超敏

ECL 化学发光检测试剂盒

适合大多数常规实验的检测

检测 ng 级别的抗原

适配蛋白表达丰度较高的western blot检测

背景低, 数据分析更省时

适用于X-光胶片或化学发光或荧光发光的检测

※ 检测低丰度蛋白可能出现弱/无条带

适合成像系统捕捉信号

检测 pg 级别的抗原, 节省样品及抗体

适配蛋白表达丰度较低的western blot检测

背景低, 信号稳定持久

※ 检测过高/低丰度蛋白可能结果异常

适合成像系统捕捉较弱信号

检测低 pg 级别的抗原, 有效节省样品及抗体

适配蛋白表达丰度低的western blot检测

优化配方, 发光强度及其持久性大力增强

※ 检测高丰度蛋白可能出现高背景

货号	产品名称	100ml 装	200ml 装	500ml 装	品牌
PK10001	普通 ECL 化学发光检测试剂盒高灵敏, 检测达 ng 级	咨询 优惠	咨询 优惠	咨询 优惠	
PK10002	灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒高灵敏, 检测达 pg 级				
PK10003	超敏 ECL 化学发光检测试剂盒高灵敏, 检测达 pg 级				

显色、显影等其他辅助试剂

货号	产品名称	规格	包装	特价	品牌
FF058	医用 X 射线胶片 12.7X17.8cm	5X7in 100 片/盒	1 盒	咨询 优惠	
FFC58	压片暗盒	5X7in	1 个		
P0019	显影定影试剂盒	可配制各 1 加仑(即 3785 毫升)	1 套		
PK10005	增强型 DAB 显色试剂盒 (WB)	HRP 显色底物	40ml 200ml		



云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI (VivaCell) / Proteintech/ Stemcell / ACD / Peprotech / 赛库等---云南总代理

电话: 0871-65100545、65100597

免费订货热线及企业 QQ 服务号: 400-8700-545

邮箱: admin@kmzehao.com

公司网站: <http://www.kmzehao.com>



微信公众号: ynzehao

扫码联系客服