



简单快速分离PBMC的特殊试管

只需15分钟 更纯、更快



轻松分离PBMC

Fast & Easy
Cell Isolation

使PBMC的分选更简单、更标准

从全血中分选外周血单个核细胞 (PBMCs) 是一项比较困难的实验室操作。有了SepMate™, PBMC分选再也不如此费时而困难了。SepMate™是一种专用的离心管, **仅需15分钟**即可迅速完成PBMC分选, 且结果具有一致性。它内部含有一个独特的插件, 能够防止血液与离心液的混合, 以便将血液快速移液或倾倒入密度梯度离心液 (如Lymphoprep™) 之上。经10分钟离心后 (无需关闭刹车), 即可将血浆和PBMCs轻松倒入一个新的试管中。

SepMate™离心管的生产符合现行药品生产质量管理规范 (cGMP), 且已通过无菌测试, 以确保不对样本造成污染²。

为何使用SepMate™?

简单。免去费时费力进行分层操作的麻烦。

快速。仅需10分钟离心 (无需关闭刹车), 可轻松将PBMCs倒入一个新的试管中。

一致性。降低错误, 减少不同用户间的操作差异。

高质量。SepMate™离心管的生产符合cGMP规范, 且经过辐照灭菌。


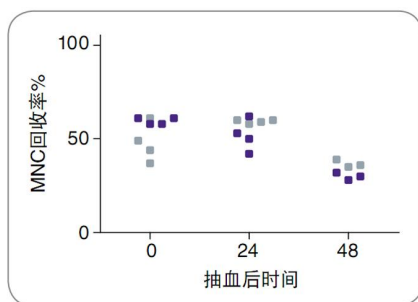


图1. 来自单个血液样本的MNCs在抽血后0小时、24小时和48小时的回收率, 该血液样本以使用SepMate™-15 (紫色方格) 或不使用SepMate™-15 (灰色方格) 的密度梯度离心法加以富集。

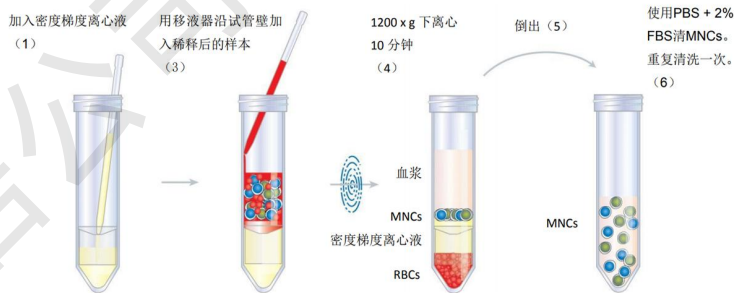

2023 咨询心动促销价

货号	品名	处理血样	描述	规格	目录价	特价
85415	SepMate™-15 (IVD) 15ml	0.5-5ml	配合 Lymphoprep™ 仅需 15 分钟即可轻松完成 PBMC 分选, 免去费时费力进行分层操作的麻烦。可与	25 支/包	体验价	
85420	细胞分离离心管, 无菌包装			100 支/盒	3784	
				500 支/箱	13736	
85450	SepMate™-50 (IVD) 50ml	4-17ml	RosetteSep™ 配合使用, 在 25 分钟内完成从全血中分选特定细胞亚型	25 支/包	体验价	咨询更多优惠
85460	细胞分离离心管, 无菌包装			100 支/盒	4810	
				500 支/箱	13736	
07801	Lymphoprep™ 淋巴细胞分离液	密度 1.077g/ml	一种密度梯度离心液, 推荐从外周血、脐血和骨髓中分离单个核细胞 PBMC, cGMP 认证产品, 细胞治疗客户的首选, 内毒素含量低于 0.13EU/ml。可完全取代 ficoll-Paque	250ml	854	
07811	配合 SepMate™ 细胞分离离心管			4X250ml	2166	
07851	使用仅需 15 分钟可完成 PBMC 分选			500ml	1362	
07861	选 Axis-Shield 贴牌			6X500ml	4822	

SepMate™离心管可用于人外周全血、骨髓和脐带血样本。不可用于超过 48 小时的样本。

SepMate™离心管通过辐照法灭菌。当包装未开封或完好无损时为无菌状态。不可重复使用或重复灭菌。

SepMate™离心管在 cGMP 的质量管理体系下生产制造, 符合 21 CFR 820 和 ISO 13485 认证。

密度梯度离心液 Lymphoprep™ 密度与 Ficoll-Paque™ PLUS 相同, 可以完全替代而无需对现有流程做任何改变。



独一无二的免疫密度梯度细胞分选
只需简单离心、即可分选细胞

一种直接从全血中分离出未经标记细胞的快速简单的免疫密度梯度方法

只需在标准的 ficoll 离心前室温孵育 20 分钟

无需磁极、无需分离柱、无需特殊仪器

产品特点

高回收率，无细胞丢失

负选出的细胞未经标记，可立即用于下游应用

灵活性好，可同时处理多个大小容量样本

安全，最大限度减少样品处理工作

分选细胞类型	处理血样	货 号	目录价	特价	分选细胞类型	处理血样	货 号	目录价	特价	
T 细胞	40ml 全血	15021	2232	咨询 更多 优惠	脐带血中的祖细胞	40ml 全血	15026	2694	咨询 更多 优惠	
	200ml 全血	15061	8892			200ml 全血	15066	8722		
人 CD4+ T 细胞	40ml 全血	15022	2232		骨髓中的祖细胞	40ml 全血	15027	5230		
	200ml 全血	15062	8680			200ml 全血	15067	20078		
人 CD8+ T 细胞	40ml 全血	15023	2250		骨髓中的间充质干细胞	40ml 全血	15128	2232		
	200ml 全血	15063	8722			200ml 全血	15168	8728		
B 细胞	40ml 全血	15024	2250		骨髓中的多发性骨髓瘤细胞	40ml 全血	15129	5852		
	200ml 全血	15064	8892			200ml 全血	15169	21886		
NK 细胞	40ml 全血	15025	2294		循环上皮肿瘤细胞（广泛富集）	40ml 全血	15127	5330		
	200ml 全血	15065	8680			200ml 全血	15167	20076		
单核细胞	40ml 全血	15028	2294		循环上皮肿瘤细胞（去除 CD45）	40ml 全血	15122	2232		
	200ml 全血	15068	8890			200ml 全血	15162	8676		
全系淋巴细胞	40ml 全血	15223	2246		其他更多指标或订制产品，可访问 www.RosetteSep.com					
	200ml 全血	15263	8676							

EasySep™ 免疫磁珠细胞分选



EasySep™ 结合了单克隆抗体的特异性和无柱磁珠分选系统的简便性，以轻松分选高纯度的细胞，分选出的细胞可立即用于下游应用。这一强大且用途广泛的免疫磁珠细胞分选平台可用于正选、负选或去除细胞，适用于包括脾脏细胞、淋巴结、外周血单个核细胞、全血、脐带血、骨髓和白细胞单采术样本。可在短至 8 分钟内从各种物种中分选出细胞，包括人、大鼠、非人灵长类、小鼠、兔子、牛和猪。

- 简单快捷 短至 8 分钟，简单倾倒即可分离未经标记的细胞。
- 高纯度 可达 99% 的细胞纯度，且回收率高。
- 温和 可获得大量活性较高、功能良好的细胞，无需分离柱或洗脱。
- 用途广泛 可从几乎任何样本来源分选细胞，包括全血和 Leuko Paks。
- 兼容流式细胞分析 EasySep™ 磁珠不干扰 FACS 分析或其他下游应用。



全新的 EasySep™ 分选人细胞的操作流程（负选）



*该时间是全新的负选试剂盒所需的常规时间。每款试剂盒所需的实际时间取决于使用的磁极和分选流程。
全新的负选流程中无需磁珠孵育的步骤。

磁极及辅助试剂 无需分离柱，倾倒即可收集细胞


咨询心动促销价

货号	品名	适配试管	起始样本细胞	处理血样	目录价	特价
18000	EasySep™ Magnet 磁极	12 x 75 mm (5 mL)	0.1-2.5×10 ⁸ 个细胞	100ml 以内	15228	咨询
18001	"The Big Easy" EasySep™ Magnet 磁极	17 x 95 mm (14 mL)	0.2-1×10 ⁹ 个细胞	400ml	22836	更多
20144	EasySep™ Buffer 分选用缓冲液	规格 1000ml			1548	优惠

经典热卖磁珠负选试剂盒 处理细胞 1 x 10⁹ cells 负选磁珠标记不需要的细胞

货号	品名	分选细胞	目录价	特价
17951	EasySep™ Human T Cell Isolation Kit	人 T 细胞	11340	咨询 更多 优惠
17952	EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit	人 CD4+T 细胞	11340	
17953	EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit	人 CD8+T 细胞	11490	
17955	EasySep™ Human NK Cell Isolation Kit	人 NK 细胞	10878	
19555	EasySep™ Human Naïve CD4+ T Cell Isolation Kit	人初始 CD4+T 细胞	11484	
18063	EasySep™ Human CD4+CD127lowCD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit	CD4+CD127low+CD25	14408	咨询 更多 优惠
19359	EasySep™ Human Monocyte Isolation Kit	人单核细胞	11568	
17957	EasySep™ Human Neutrophil Isolation Kit	人中性粒细胞	15038	
19851	EasySep™ Mouse T Cell Isolation Kit	小鼠 T 细胞	8986	
19852	EasySep™ Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit	小鼠 CD4+T 细胞	8952	
19765	EasySep™ Mouse Naïve CD4+ T Cell Isolation Kit	小鼠 CD4+初始 T 细胞	10244	
19853	EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit	小鼠 CD8+T 细胞	8952	
19858	EasySep™ Mouse Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit	小鼠 CD8+初始 T 细胞	10314	
19854	EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit	小鼠 B 细胞	8914	
19844	EasySep™ Mouse Pan-B Cell Isolation Kit	小鼠 pan-B 细胞	9320	
19861	EasySep™ Mouse Monocyte Isolation Kit	小鼠单核细胞	8952	咨询 更多 优惠
19856	EasySep™ Mouse Hematopoietic Progenitor Cell	小鼠造血祖细胞	8594	
19581	EasySep™ Non-Human Primate T Cell Isolation Kit	非人灵长类 T 细胞	10436	
19582	EasySep™ Non-Human Primate CD4+ T Cell Kit	非人灵长类 CD4+ T 细胞	10436	
19583	EasySep™ Non-Human Primate CD8+ T Cell Iso Kit	非人灵长类 CD8+ T 细胞	10436	
100-0345	EasySep™ Non-Human Primate B Cell Isolation Kit	非人灵长类 Pan-B 细胞	12142	咨询 更多 优惠
19809	EasySep™ 非人灵长类细胞定制富集试剂盒	任何细胞类型（定制）	询价	


最短 8 分钟
可完成分选

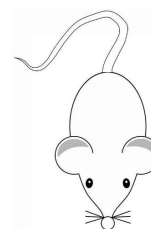

经典热卖磁珠正选试剂盒 正选磁珠标记需要的细胞

货 号	品 名	处理细胞	分选细胞	目录价	特 价
17851	EasySep™ Human CD3 Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells	人 CD3+T 细胞	7834	咨询 更多 优惠
17853	EasySep™ Human CD8 Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells	人 CD8+T 细胞	7834	
17855	EasySep™ Human CD56 Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells	人 CD56（NK）细胞	8474	
17856	EasySep™ Human CD34 Positive Selection Kit II	5 x 10 ⁹ cells	人 CD34+（PBMC）	12130	
17858	EasySep™ Human CD14 Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells	人 CD14+T 细胞	8634	
17899	EasySep™ Dead Cell Removal (Annexin V) Kit	1 x 10 ⁹ cells	死细胞去除	9088	
间标磁珠正选试剂盒 几乎可以分选任何物种的任意类型的细胞，只要目的细胞有特定的标志和有相应的一抗，就可以对其进行磁性分选					
17684	EasySep™ PE Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells	间标磁珠正选试剂盒	6602	咨询 更多 优惠
17682	EasySep™ FITC Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells		5020	
17681	EasySep™ APC Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells		6732	
17683	EasySep™ Biotin Positive Selection Kit II	1 x 10 ⁹ cells		6270	

如何选择最适合您的分选产品

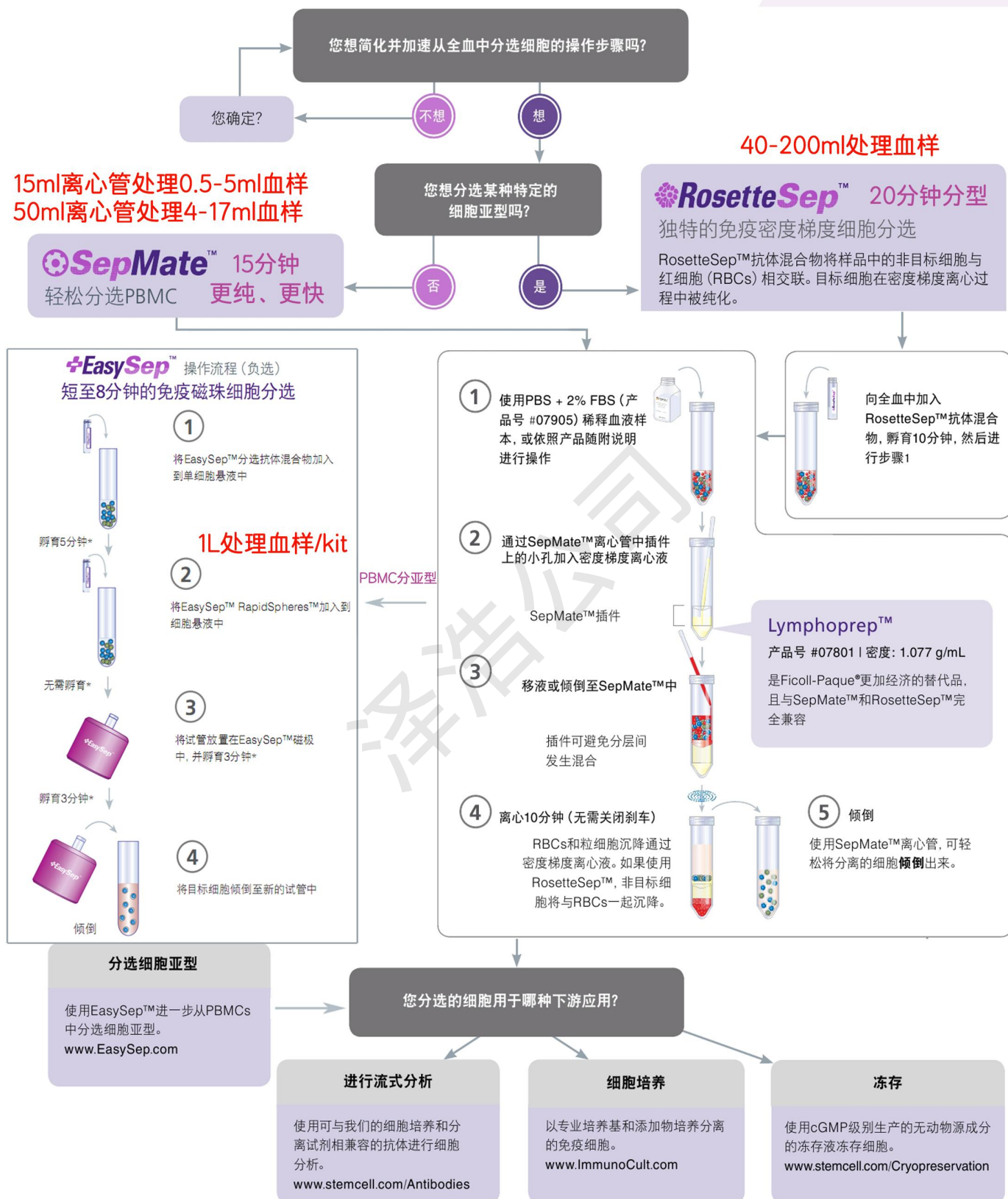

云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI (VivaCell) / Proteintech/ Stemcell / ACD / Peprotech / 赛库 / 鸿基等---云南总代理

免费订货热线: 400-8700-545

(获取更多信息) 微信公众号: ynzehao

公司网站: <http://www.kmzehao.com>



关注微信号: ynzehao



扫码联系客服